



EVE

**Prophylaxe
2012**



**made
in
Germany**



**EVE –
Qualität aus Tradition –
Vorsprung durch Innovation**

**EVE –
A tradition of quality –
Ahead through innovation**



EVE Service

Eine Auftragsbestätigung und den voraus-sichtlichen Liefertermin erhalten Sie umge-hend. Für weitere Produktinformationen und technische Fragen steht Ihnen ein Team von Produktspezialisten zur Verfügung
Alle Produkte und Kataloge sind auch online einsehbar. Besuchen Sie EVE im Internet: www.eve-rotary.com

Weltweit

... für Sie da!

Unsere Zentrale erreichen Sie

Mo. - Do. von 8 bis 17 Uhr,
Fr. von 8 bis 15 Uhr

per E-Mail, Telefon oder Fax:

info@eve-rotary.com
Fon 07231 9777-0
Fax 07231 9777-99

EVE Service

After placing their purchase order with us, our customers will receive an order confirmation that includes the expected ship date. For more product information and technical questions, please contact our team of product specialists.
All products and catalogues can also be viewed online. We invite you to visit EVE on the Internet: www.eve-rotary.com

World wide

... at your service!

You may contact our head office from

Mon - Thur 8 a.m. to 5 p.m. CET
Fri 8 a.m. to 3 p.m. CET

by e-mail, telephone or fax:

info@eve-rotary.com
Phone +49 (0) 7231 9777-0
Fax +49 (0) 7231 9777-99

USA / Canada

... at your service!

You can contact us from

Mon - Thur 9 a.m. to 5 p.m. EST
Fri 9 a.m. to 3 p.m. EST

by e-mail, telephone or fax:

info@eve-america.com
Phone +1 (239) 591 2777
Fax +1 (239) 591 2007

Kontrollierte Qualität und geprüfte Sicherheit

Die EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und 13485 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch bei der Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Ver-trieb wird durch das Qualitätsmanagement-System vorgegeben.

Alle Medizinprodukte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG sowie des Medizinprodukte-gesetzes (MPG) und tragen ein CE-Kennzei-chen. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe, moderne Fertigungsmethoden und eine wirksame Endkontrolle stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Pro-dukte.

Qualität, Präzision und Innovationskraft werden auch in Zukunft die Kennzeichen unserer Produkte und unseres Unterneh-mens sein.

Quality Control and Safety Testing

EVE Ernst Vetter GmbH is DIN EN ISO 9001 and 13485 certified. The high quality stan-dards in development, production and admi-nistration, as well as in distribution, are set by the Quality Management System.

The medical products meet the requirements of Directive 93/42/EEC as well as the regula-tions contained in the Medical Devices Act (MDA) and are CE-labeled. We ensure strict goods inspections for any incoming raw ma-terials. State-of-the-art production methods guarantees the consistent high quality of all EVE products.

Quality, precision and innovation conti-nues to be the focus of our products and our company.



	Material / Materials	Seite / Page
Prophylaxe / Prophylaxis		
EVE UNIBRUSH		1
EVE PROPASTE		1
EVE PROPHY		2
EVE PROPHYCLEAN		3
EVE DIASTRIPES		4
EVE PROPHYSTRIPES		4

Qualitätsmerkmale / Quality features



Allgemeine Qualitätsmerkmale und Eigenschaften von EVE Produkten

- Lange Lebensdauer
- Exakter Rundlauf
- Träger aus rostfreiem Edelstahl
- Passgenauigkeit
- Hohe Konzentration der verwendeten Körnung
- Optimale Bindungshärte
- Die EVE Diamantpolierer erzeugen vergleichbare Ergebnisse zum Glanzbrand
- Alle EVE Polierer sind ohne Polierpaste verwendbar
- Latexfrei
- Alle Produkte der Medizinproduktklasse IIa sind sterilisierbar
- REACH konforme Rohstoffe
- Geprüfte Qualität nach ISO 9001

General quality features and characteristics of EVE products

- Long service life
- Precise rotation
- Stainless steel mandrels
- Accurate fit
- High concentration of the selected grit
- Optimal binding hardness
- EVE diamond polishers create results comparable to glazing
- All EVE polishers can be used without polishing compounds
- Latex free
- All products in Medical Device Class IIa and US/Canada Class 1 can be sterilized
- REACH-compliant raw materials
- Tested quality as per ISO 9001

Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise / Sterilisation

Die Gebrauchs-, Sicherheits- und Sterilisationsanweisungen entnehmen Sie bitte von unserer Internetseite unter:
www.eve-rotary.com/downloads

Instruction for use / Safety Tips / Sterilisation

Instructions for use, safety and sterilisation can be found on our website:
www.eve-rotary.com/downloads

Prophylaxe / Prophylaxis

EVE UNIBRUSH

Härte / Hardness:

- hart / hard
- mittel / medium
- super weich / supersoft

Anwendungen / Applications

Eigenschaften / Characteristics

Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
 empf. / rec.: 5.000 - 7.000 min⁻¹
 max.: 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:

EVE UNIBRUSH

Nylonbürstchen für die Politur von Keramiken, Kompositen, Metallen und zur Prophylaxebehandlung mit Polierpasten.

- Prophylaxebehandlung
- Auf allen erhältlichen Keramiken, Kompositen und Metallen
- Universell einsetzbar
- High-end-Poliersystem in Verbindung mit EVE DIAMANT (DP1 Polierpaste, S. 49)
- Ausgangstopographie der Oberfläche bleibt nahezu unverändert
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Schmelzeffekte
- Große Formenauswahl
- In unterschiedlichen Härten erhältlich

EVE UNIBRUSH

Nylon brushes for polishing porcelain, composite, metals and prophylactic treatment with polishing paste.

- Prophylactic treatments
- For all available ceramics, composites and metals
- Can be used universally
- High-end polishing system in combination with EVE Diamond (DP1 polishing paste, p. 49)
- Initial topography of the surface remains almost unchanged
- Low heat generation, no melting
- Large selection of shapes
- Available in various degrees of hardness



WTH	WZH	WSH	WPH
9451	9452	9453	9454
6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	2,5 x 3
WTM	WZM	WSM	WPM
9461	9462	9463	9464
WTS	WZS	WSS	WPS
9471	9472	9473	9474

EVE PROPASTE

Anwendungen / Applications

Eigenschaften / Characteristics



Packung / Pack: 100 Stück / pieces*
 *inkl. Ringhalter
 *incl. ring holder

Geschmack: / Taste:

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Körnung: / Grit:

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Körnung: / Grit:

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Körnung: / Grit:

EVE PROPASTE - Prophylaxepaste (ohne Fluorid) für die Reinigung und Politur.

- Beseitigung von Zahnbelägen, äußerlichen Verfärbungen und zur Politur des Zahnschmelzes
- Politur nach Zahnsteinentfernung, nach der Entfernung von KFO-Geräten und Brackets, nach dem Bleichen
- Reinigung von Füllungsmaterialien
- Ohne Fluorid
- Spritzt nicht
- Kein Eintrocknen
- Angenehmer Geschmack und Geruch
- Erhältlich in drei verschiedenen Körnungen (grob, mittel, fein) und zwei Geschmacksrichtungen

EVE PROPASTE - Prophylaxis paste (without fluoride) for cleaning and polishing natural teeth.

- Eliminating plaque and stains, polishing enamel
- Polishing after removal of tartar, orthodontic devices and braces, after bleaching
- Cleaning filling materials
- Fluoride free
- No splashing
- Does not dry out
- Pleasant taste and smell
- Available in three different grits (coarse, medium, fine) and two flavours

	Minze / mint	Erdbeere / strawberry
	PROPASTE MC	PROPASTE SC
	9721	9720
	grob / coarse	grob / coarse
	PROPASTE MM	PROPASTE SM
	9731	9730
	mittel / medium	mittel / medium
	PROPASTE MF	PROPASTE SF
	9741	9740
	fein / fine	fein / fine

Prophylaxe / Prophylaxis

EVE PROPHY SNAP-ON / EVE PROPHY ONE / EVE PROPHY

Härte / Hardness:

- hart / hard
- mittel / medium
- weich / soft
- super weich / supersoft



Set RA 420
Seite / Page: 52

Anwendungen / Applications

Eigenschaften / Characteristics

EVE PROPHY Prophylaxe-Polierer, montierte Polierer mit integriertem Spritzschutz. Sterilisierbar (Mehrfachverwendung).

EVE PROPHY ONE Prophylaxe-Polierer, Einwegsystem auf hochpräzisem Kunststoffschaft.

EVE SNAP-ON Prophylaxe-Polierer, Snap-On System.

Die Polierer werden einfach auf das selbstfindende Edelstahlmandrel gesteckt. Ein Silikonring schützt das Winkelstück vor Rückständen. Sterilisierbar (Mehrfachverwendung).

- Reinigung und Politur
- Politur bis unter den Zahnfleischrand dank dünn auslaufendem Kelchrand
- Konisch zulaufende Lamellen minimieren Pastenspritzer
- Unterschiedliche Polierkopfhärten ermöglichen hohe Flexibilität bei der Reinigung
- Latexfrei
- Mit und ohne Paste verwendbar

EVE PROPHY Prophylactic mounted polishers with integrated splash guard. Sterilizable (multiple use).

EVE PROPHY ONE Prophylactic polishers, disposable system. Mounted on a high quality plastic shank.

EVE SNAP-ON Prophylactic polishers, snap-on system.

The polishing cups can simply be attached to the self-positioning stainless steel mandrel. A silicone ring protects the contra angle against residues. Sterilizable (multiple use).

- Cleaning and polishing
- Allows polishing down to the gum line due to the thin-edged cup
- Conical inside lamellars prevents the polishing paste from splashing
- Polishing tops in different hardnesses provide a high level of flexibility during prophylactic treatment
- Latex free
- To be applied with or without polishing paste

EVE PROPHY

Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
 empf. / rec.: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 max.: 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):



PR3-hard	PR3-medium	PR3-soft	PR3-supersoft
9411	9421	9431	9441
7 x 12	7 x 12	7 x 12	7 x 12

EVE PROPHY ONE



Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
 empf. / rec.: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 max.: 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):



PRO3-hard	PRO3-medium	PRO3-soft	PRO3-supersoft
9412	9422	9432	9442
7 x 10	7 x 10	7 x 10	7 x 10

EVE PROPHY SNAP-ON

Packung / Pack: 10, 100* Stück / piece
 *mit oder ohne Halter /
 *with or without mandrel
 empf. / rec.: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 max.: 10.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
 Artikel-Nr.: / Item No.:
 Maße (mm): / Sizes (mm):



PRS3-hard	PRS3-medium	PRS3-soft	PRS3-supersoft	98RA
9413	9423	9433	9443	9598
7 x 10	7 x 10	7 x 10	7 x 10	

EVE PROPHYCLEAN®

EVE PROPHYCLEAN® Zahnreinigungsinstrument

Instrument für vielseitige Anwendungen bei der Prophylaxebehandlung.

EVE PROPHYCLEAN® Tooth cleaning instrument

Instrument for a wide range of applications during prophylactic treatment.

Anwendungen / Applications

- Entfernen von Zahnstein, Belägen, Verfärbungen und Initialkaries
- Entfernen von Bracketkleberesten
- Entfernen von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung
- Politur schwer zu erreichender Bereiche; auch nach Ultrashallanwendung empfehlenswert
- Mechanische Prophylaxeoption bei Überempfindlichkeit gegen Ultrashall

- Removing plaque, tartar, stains and initial caries
- Removing adhesive remnants after bracket debonding
- Removing excess cement
- Subgingival root smoothing
- Polishing hard-to-reach areas; recommended even after ultrasonic application
- Mechanical prophylactic option for patients sensitive to ultrasonic

Eigenschaften / Characteristics

- Keine Abnutzung von Zahnhartsubstanz und Keramik
- Durch optimierte Körnung keine Verletzung am Zahnschmelz
- Faserfrei
- Durchgehend imprägniert mit Körnung
- Latexfrei

- Optimized protective grit does not damage enamel and porcelain
- Fibre free
- Entirely interspersed with abrasive
- Latex free

Set RA EVE PROPHYCLEAN®

10-teilig / 10 pieces

RA 410: 2 x PC-100, 2 x PC-101, 2 x PC-102, 2 x PC-103, 2 x PC-111

RA 411: PC-100, PC-100g, PC-101, PC-101g, PC-102, PC-102g, PC-103, PC-103g, PC-111, PC-111g

RA 412: 2 x PC-100g, 2 x PC-101g, 2 x PC-102g, 2 x PC-103g, 2 x PC-111g



Artikel-Bez.: / Item:	RA 410	RA 411	RA 412
Artikel-Nr.: / Item No.:	9080	9081	9082

EVE PROPHYCLEAN® grob / coarse

Härte / Hardness: hart / hard
 Körnung / Grit: grob / coarse
 Packung / Pack: 1, 10 Stück / piece
 empf. / rec.: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 max.: 20.000 min⁻¹



Artikel-Bez.: / Item:	PC-100g	PC-101g	PC-102g	PC-103g	PC-111g
Artikel-Nr.: / Item No.:	8700	8701	8702	8703	8711
Maße (mm): / Sizes (mm):	2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5

EVE PROPHYCLEAN® mittel / medium

Härte / Hardness: hart / hard
 Körnung / Grit: mittel / medium
 Packung / Pack: 1, 10 Stück / piece
 empf. / rec.: 5.000 - 10.000 min⁻¹
 max.: 20.000 min⁻¹



Artikel-Bez.: / Item:	PC-100	PC-101	PC-102	PC-103	PC-111
Artikel-Nr.: / Item No.:	8800	8801	8802	8803	8811
Maße (mm): / Sizes (mm):	2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7,5	2,35 x 7,5	3 x 6,5

EVE DIASTRIPES

EVE DIASTRIPES, Diamant Diamantierte Separier- und Finierstreifen.

EVE DIASTRIPES, Diamond Diamond coated separating and finishing strips.

Anwendungen / Applications

- Für die manuelle Gestaltung von Füllungen und Zahnhartsubstanz im Approximalraum

- For manual shaping of fillings and enamel in proximal spaces

Eigenschaften / Characteristics

- Einseitig beschichtet mit Diamantkörnung
- Optimierte Körnungsabstufungen
- Verbesserte Kühlung gegenüber vollbeschichteten Streifen
- Autoklavierbar und sterilisierbar

- Coated on one side with diamond grit
- Optimized grit levels
- Better cooling in comparison to fully coated strips
- Autoclavable and sterilizable



Set PDL4 - 3 / 3 / 3 Stück / piece
Artikel-Nr.: / Item No.: 9014

Packung / Pack: 3 / 9 Stück / piece

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Maße (mm): / Sizes (mm):

Stärke (mm): / Thickness (mm):

Körnung: / Grit:

Artikel-Bez.: / Item:	PDL-45/4	PDL-35/4	PDL-10/4
Artikel-Nr.: / Item No.:	9101	9102	9103
Maße (mm): / Sizes (mm):	4 x 150	4 x 150	4 x 150
Stärke (mm): / Thickness (mm):	0,11	0,10	0,07
Körnung: / Grit:	fein / fine (45µ)	extra fein / extra fine (35µ)	super fein / super fine (5-15µ)

Set PDL2,5 - 3 / 3 / 3 Stück / piece
Artikel-Nr.: / Item No.: 9012

Packung / Pack: 3 / 9 Stück / piece

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Maße (mm): / Sizes (mm):

Stärke (mm): / Thickness (mm):

Körnung: / Grit:

Artikel-Bez.: / Item:	PDL-45/2,5	PDL-35/2,5	PDL-10/2,5
Artikel-Nr.: / Item No.:	9106	9107	9108
Maße (mm): / Sizes (mm):	2,5 x 150	2,5 x 150	2 x 150
Stärke (mm): / Thickness (mm):	0,11	0,10	0,07
Körnung: / Grit:	fein / fine (45µ)	extra fein / extra fine (35µ)	super fein / super fine (5-15µ)

EVE PROPHYSTRIPES



EVE PROPHYSTRIPES, Aluminiumoxid Flexible Finier- und Polierstreifen für Komposite, Kompomere, Glasionomere, Amalgam und für die Reinigung der Approximalräume.

EVE PROPHYSTRIPES, aluminium oxide Flexible aluminum oxide coated cleaning and finishing strips for composites, amalgam and natural teeth.

Blau = grob: Abtragen und Konturieren
Rot = mittel: Glätten und Vorpolieren
Gelb = fein: Politur
Weiß = extra fein: Hochglanzpolitur

Blue = coarse: Removing and contouring
Red = medium: Smoothing and pre-polishing
Yellow = fine: Polishing
White = extra fine: High-lustre polishing

Anwendungen / Applications

- Finieren, Polieren und Reinigen
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Optimierte Körnungsabstufung (in vier Körnungsstufen erhältlich)
- Keine Beschädigung der Nachbarzähne, da einseitig beschichtet
- Für den Einmalgebrauch

- Finishing, polishing and cleaning
- Coated on one side with aluminum oxide
- Optimized grit level (four grit levels available)
- Does not damage adjacent teeth because of its one-sided coating
- Disposable

Set PS-50 25/25 Stück / piece
Artikel-Nr.: / Item No.: 9010

Packung / Pack: 50 Stück / piece

Artikel-Bez.: / Item:

Artikel-Nr.: / Item No.:

Maße (mm): / Sizes (mm):

Stärke (mm): / Thickness (mm):

Artikel-Bez.: / Item:	PS-60/40		PS-20/7	
Artikel-Nr.: / Item No.:	9111		9112	
Maße (mm): / Sizes (mm):	4 x 150		4 x 150	
Stärke (mm): / Thickness (mm):	0,21 / 0,17		0,14 / 0,11	




**Rotary Grinding and
Polishing Instruments**

EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30
D-75179 Pforzheim, Germany
Fon +49 72 31 97 77 - 0
Fax +49 72 31 97 77 99
info@eve-rotary.com

EVE America, Inc.
5880 Shirley Street
Unit 203
Naples, FL 34109, USA
Fon +1 239 591 2777
Fax +1 239 591 2007
info@eve-america.com

www.eve-rotary.com

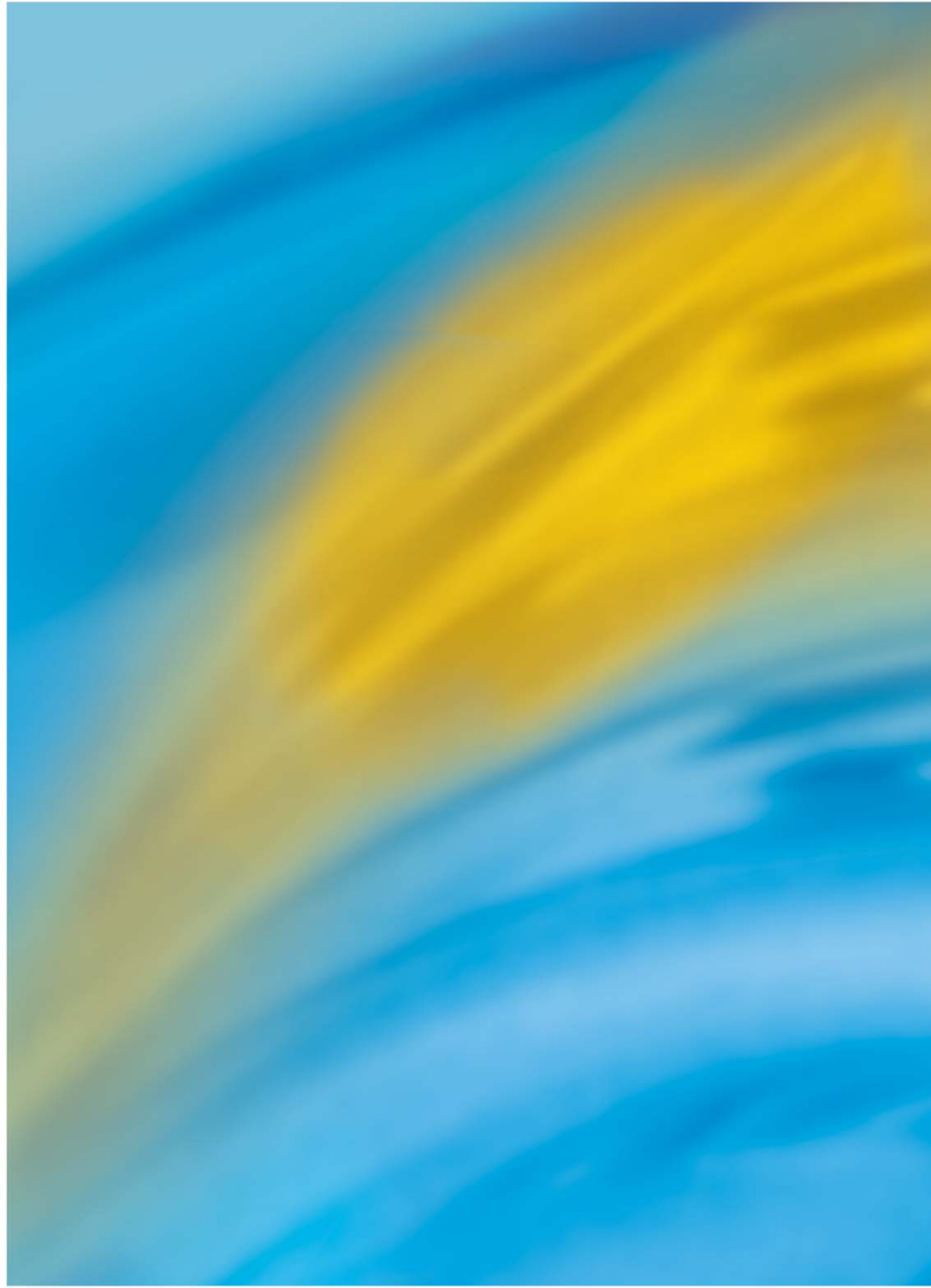

Ausgabe / Edition 10/2011



Für Druckfehler keine Haftung/
Not liable for misprints