

sagemax.com

sagemax®



NexxZr. Glaze Spray

Esmaltagem eficaz.
Processamento eficiente.

Esmaltagem eficaz.
Processamento eficiente.

NexxZr® Glaze Spray



NexxZr® Glaze Spray é um spray de glaze feito de vitrocerâmica de dissilicato de lítio de alta resistência para a finalização de restaurações monolíticas de óxido de zircônio.

O tamanho ideal das partículas de vidro bem como o bico de pulverização precisamente ajustado proporcionam uma aplicação leve, uniforme e muito fina do material. Uma única camada fina já garante uma excelente ligação adesiva ao óxido de zircônio e resulta em uma superfície lisa e homogênea - preservando até mesmo os detalhes mais intrínsecos na superfície. As características de desgaste favoráveis ao antagonista da vitrocerâmica de dissilicato de lítio proporcionam uma proteção duradoura para áreas sujeitas a elevadas pressões (por exemplo, pontos de contato).

Dados Técnicos



Tipo
Vitrocerâmica
de dissilicato
de lítio



Resistência flexural
> 140 MPa



Transmissão de luz
> 90%, transparente



Resistência de união
> 35 MPa



Abrusão
Não mensurável

Destaques

1 **Vitrocerâmica de dissilicato de lítio de alta resistência** Alta ligação adesiva com ZrO_2 e superfícies suaves e homogêneas



Aplicação extremamente fina de material de aprox. $10\ \mu\text{m}$ e alta ligação adesiva (pastas de glaze convencional aprox. $40\text{--}50\ \mu\text{m}$)

Superfícies suaves e homogêneas sem perda de estrutura superficial

2 **Tamanho ideal das partículas de vidro e bico pulverizador perfeitamente ajustado** Aplicação leve, uniforme e muito fina em segundos



Spray extremamente fino




Aplicação leve, uniforme e muito fina em segundos

3 **Resistência ao desgaste favorável ao antagonista** Proteção duradoura para áreas sujeitas a elevadas pressões, p. ex., pontos de contato



Alta resistência à abrasão para proteção duradoura

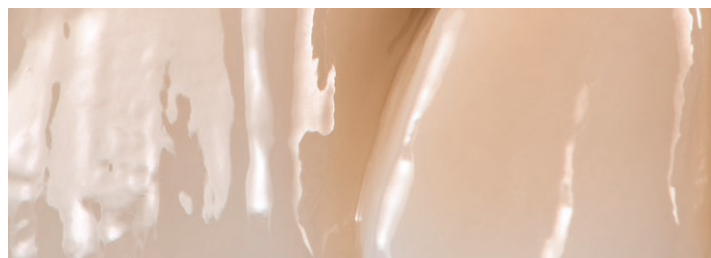

Superfícies suaves e homogêneas

Tempo e consumo



* Teste interno

Formas de apresentação

Frasco pulverizador
75 ml

Outros produtos de primeira linha



NexxZr+ Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética natural




NexxZr T Multi

Óxido de zircônio multi-camadas com estética multi-funcional e grande variedade de indicações



NexxZr+

Óxido de zircônio com alta translucidez para restaurações estéticas anteriores e posteriores

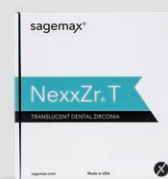

NexxZr T

Óxido de zircônio com média translucidez e alta resistência flexural para uma grande variedade de indicações e opções de processamento

Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com